

SUMMIT ÉDITION
Lumière thérapeutique




ALPINGLOW
S W I T Z E R L A N D




Manuel de l'Utilisateur

Aperçu de la luminothérapie

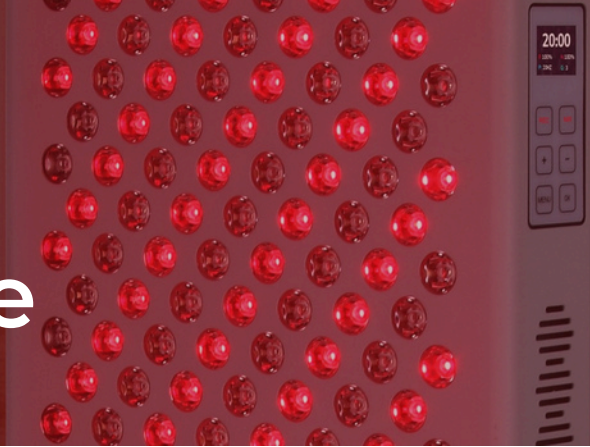

Les avantages de la lumière rouge : La lumière rouge entre 600 et 700 nm offre des avantages pour la texture et le teint de la peau, lissant les rides et ridules, favorisant la production de collagène et rajeunissant généralement l'apparence de la peau et des cheveux.

Les avantages de la lumière proche infrarouge : Lumière proche infrarouge (NIR) 700 nm - 1100 nm. pénètre plus profondément dans les tissus pour faciliter la cicatrisation des plaies, la récupération musculaire, les lésions nerveuses et les douleurs articulaires.

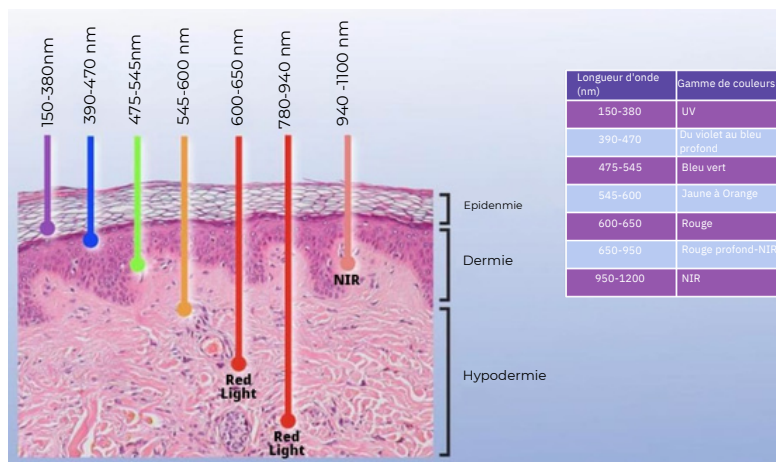

La lumière rouge stimule la production d'énergie cellulaire


Le mécanisme d'action le plus étudié autour de la thérapie par la lumière rouge et proche infrarouge est l'augmentation de la production d'énergie dans les cellules. Les mitochondries sont de minuscules organites qui sont les centrales énergétiques de toutes les cellules de notre corps. La thérapie par la lumière rouge et proche infrarouge aide les mitochondries à créer davantage de cette énergie.

Les photons spécifiques présents dans la lumière rouge et proche infrarouge interagissent avec un photorécepteur présent dans nos cellules appelé cytochrome c oxydase. Cette interaction stimule les mitochondries de nos cellules à utiliser l'oxygène plus efficacement, ce qui leur permet de produire plus d'ATP (adénosine triphosphate). L'adénosine triphosphate est un produit chimique organique complexe qui fournit de l'énergie pour piloter de nombreux processus dans les cellules vivantes, par ex. contraction musculaire, propagation de l'influx nerveux et synthèse chimique. Présent dans toutes les formes de vie, l'ATP est souvent appelé « l'unité monétaire moléculaire » du transfert d'énergie intracellulaire. Lorsque nos cellules ont plus d'énergie, elles sont tout simplement plus performantes, ce qui nous permet de nous sentir mieux, d'avoir une meilleure apparence et d'être plus performants !

Aperçu de la luminothérapie

Qu'est-ce que la thérapie par la lumière rouge et proche infrarouge ?

La thérapie par la lumière rouge et proche infrarouge constitue l'une des plus grandes découvertes révolutionnaires en matière de santé au cours du dernier demi-siècle. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont discrètement accumulé des milliers d'études sur le pouvoir de la lumière rouge et du proche infrarouge pour améliorer la santé humaine. La lumière rouge et le proche infrarouge constituent le spectre électromagnétique et plus particulièrement une partie du spectre de la lumière émise par le soleil. La photo ci-dessous montre le type de lumière qui affecte le fonctionnement de nos cellules.

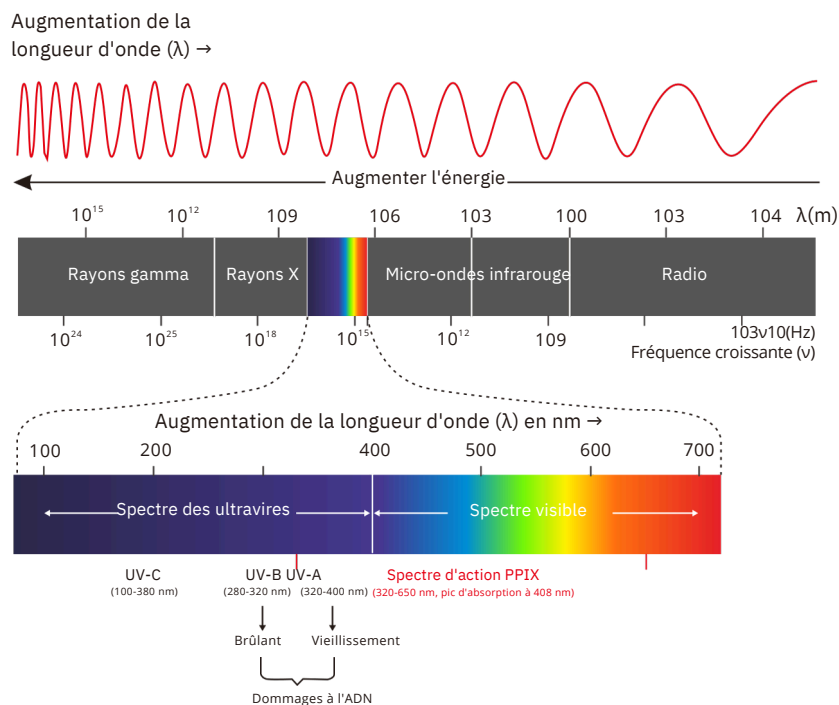


Les longueurs d'onde rouges et proches infrarouges ont des effets étonnants sur notre corps. La plupart des recherches montrant les avantages de la lumière rouge et du proche infrarouge ont utilisé des longueurs d'onde dans les plages étroites de 630 à 680 nm et de 800 à 880 nm.

Summit Lite300



Puissance des LED	300 W
Longueurs d'onde	ROUGE 660 nm et NIR 850 nm
Ampères à 110 V	0,95A
Ampères à 220 V	0,49A
Dimensions	26.9 cm x 23.1 cm x 6.6 cm
Consommation el.	103W
LEDs	60 x 5 W
Angle	Degré RED60 et degré NIR30
Ventilateurs	1 pc
Poids	3,5 kg/7,7 livres
Durée de vie des LED	100 000 heures
Émission EMF	- Négligeable
Garantie	3 ans
Zone de traitement	Traitement ciblé
Surface max.	71.1 cm x 61 cm

Summit Lite300 Irradiance

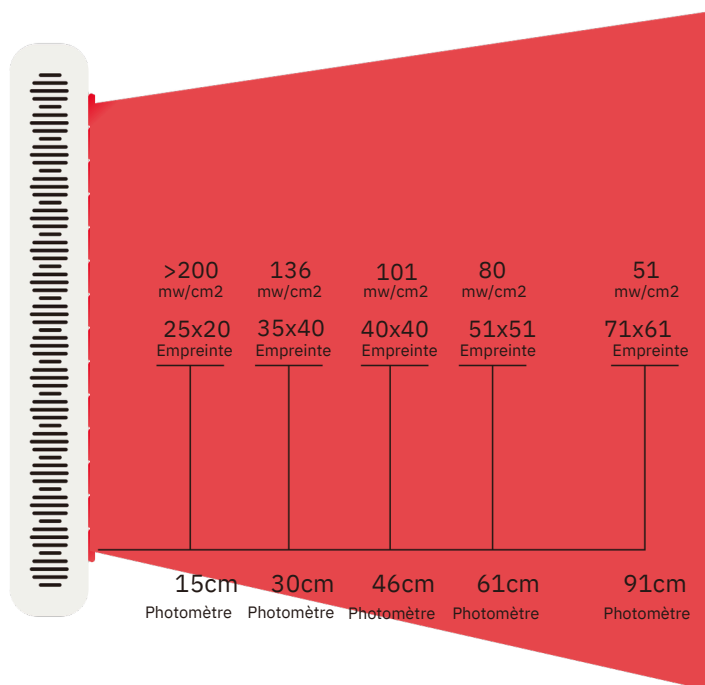


Summit Expert1500




Puissance des LED	1500W
Longueurs d'onde	ROUGE 660 nm et NIR 850 nm
Ampères à 110 V	4,86A
Ampères à 220 V	2,25A
Dimensions	90,9 cm x 29,9 cm x 6,6 cm
Consommation el.	496W
LEDs	300x5W
Angle	ROUGE 60 degrés et NIR 30 degrés
Ventilateurs	4 pièces
Poids	10,8 kg/23,8 livres
Durée de vie des LED	100 000 heures
Émission EMF	- Négligeable
Garantie	3 ans de traitement
Zone de traitement	complet du corps
Surface max.	119,4cm x 61 cm

Summit Expert1500 Irradiance

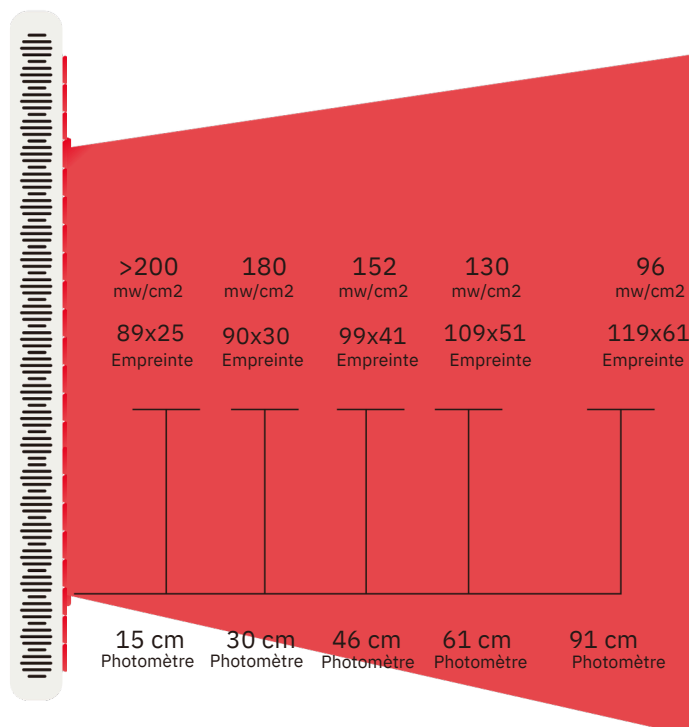


Alpinglow Summit Master3000

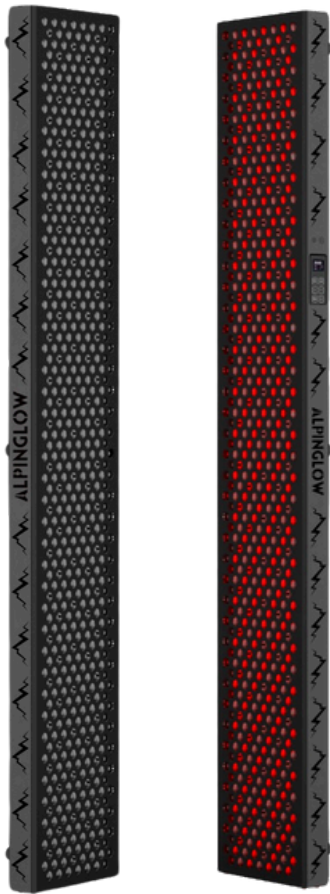


Longueurs d'onde	ROUGE 660 nm et NIR 850 nm / Personnaliser
Ampères à 110 V	9,3A
Ampères à 220 V	4,5A
Dimensions	180 cm x 30 cm x 6,6 cm
Consommation él.	992W
LED s	600x5W
Angle	Degré RED60 et degré NIR30
Refroidissement	8 pièces
Poids	21,5 kg/47,4 livres
Durée de vie des LED	100 000 heures
EMF	- Négligeable
Garantie	3 ans de traitement
Idéal pour	complet du corps
Une zone maximale	221 cm x 61 cm

Alpinglow Summit Master3000 Irradiance

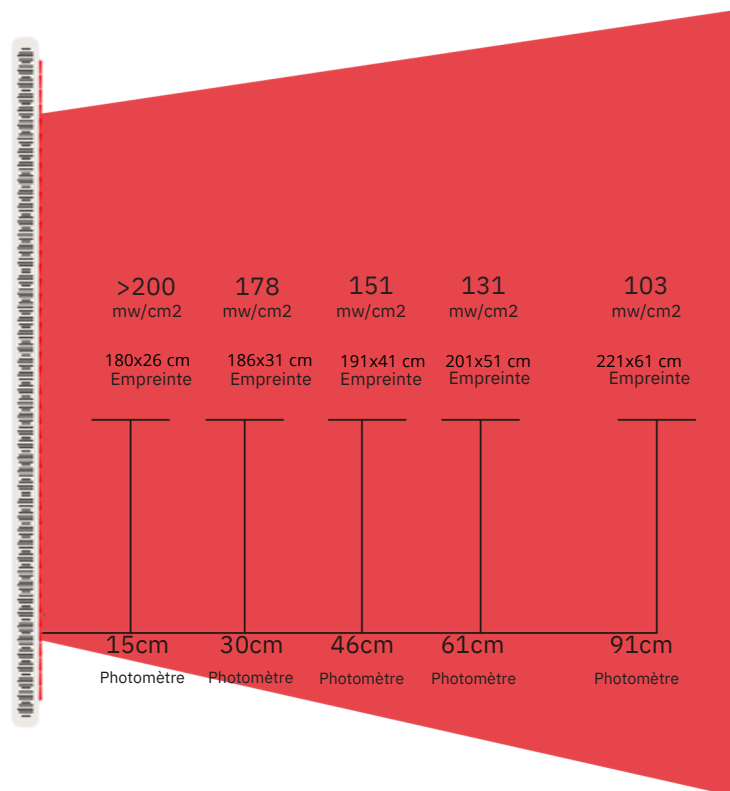


Alpinglow Summit GrandMaster6000


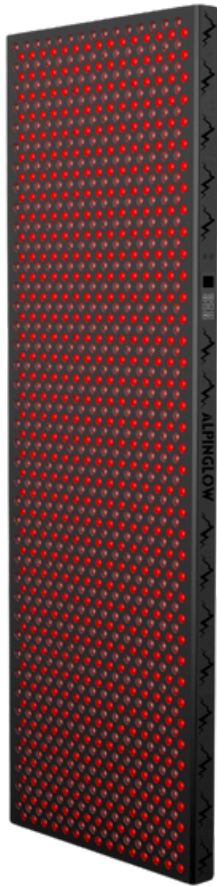


Longueurs d'onde	ROUGE660nm & NIR 850nm / Personnaliser
Ampères à 110 V	20A
Ampères à 220 V	8.7A
Dimensions	180cm x 60cm x 6,6cm
Consommation él.	2000W
LED s	1200 x 5W
Angle	Degré RED60 et degré NIR30
Refroidissement	14 pièces
Poids	40.6KG/89.5LBS
Durée de vie des LED	100 000 heures
EMF	- Négligeable
Garantie	3 ans de traitement
Idéal pour	complet du corps
Une zone maximale	221 cm x 119 cm

Alpinglow Summit GrandMaster6000 Irradiance

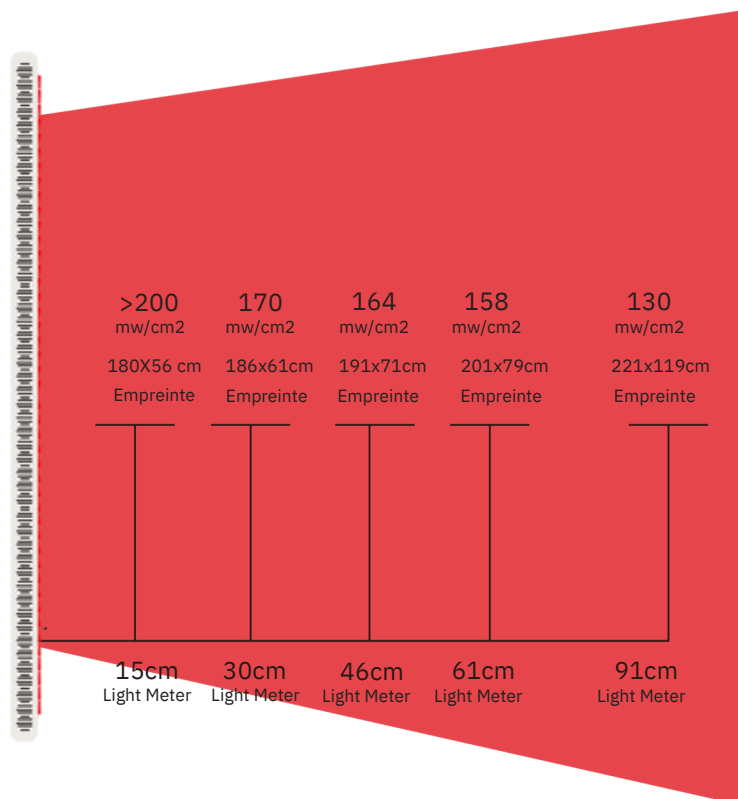


Configuration de votre Panneau de la Summit Édition

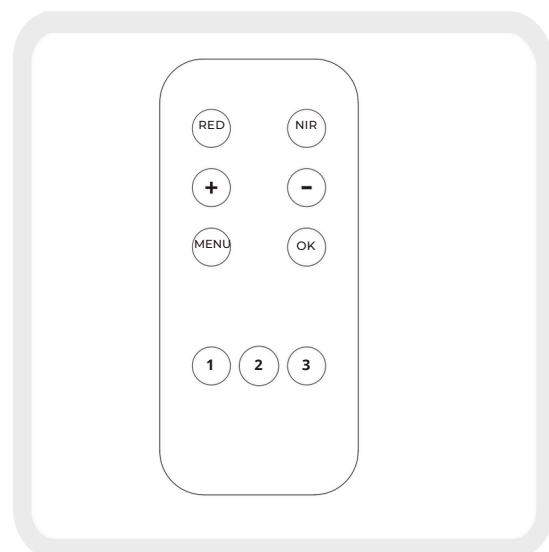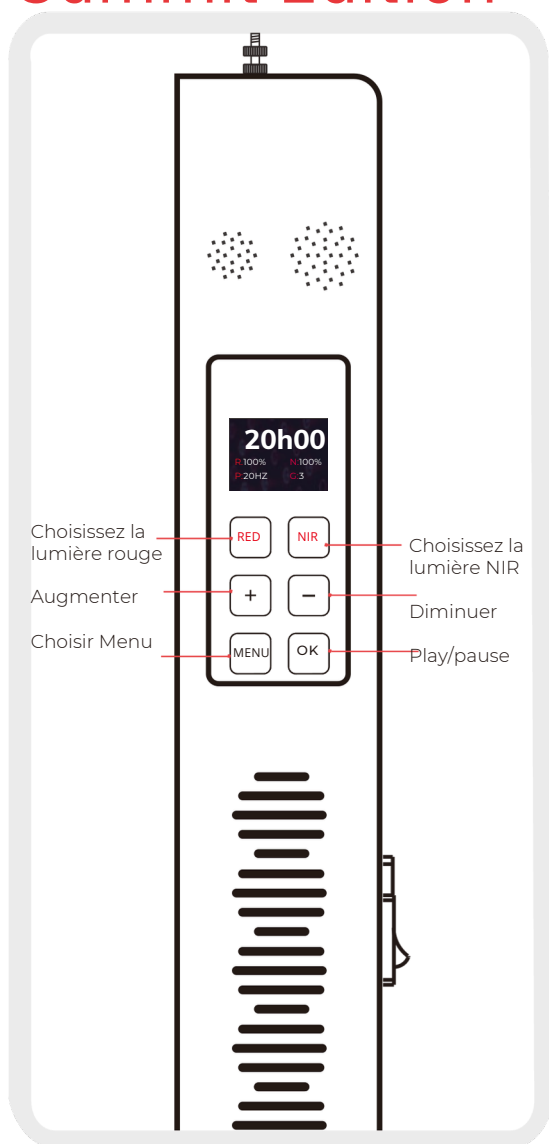

ÉTAPE ▶


- RED** Choisissez la lumière rouge
- NIR** Choisissez la lumière NIR
- +** Augmentez la valeur du temps, le pourcentage de luminosité, le numéro de groupe, la valeur d'impulsion
- Diminuer la valeur du temps, le pourcentage de luminosité, le numéro de groupe, la valeur du pouls.
- MENU** De manière cyclique, vous pouvez changer l'heure, le groupe, le pouls.
- OK** Appuyez une fois sur le bouton **OK**, démarrez votre traitement. Vous pouvez suspendre/reprendre le traitement à tout moment en appuyant sur le bouton **OK**.

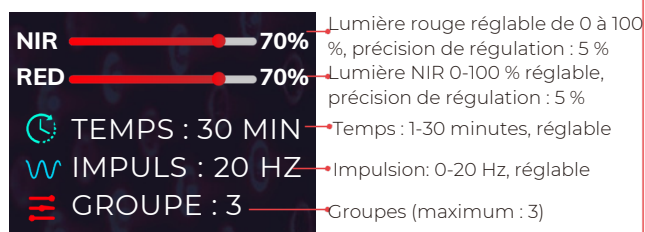

N'oubliez pas que les LED proches infrarouges émettent une lumière qui n'est PAS visible à l'œil nu.

- Appuyez sur **1**, puis appuyez sur les autres boutons pour régler la luminosité, l'heure, le pouls, toutes les lumières du groupe 1 suivront les paramètres et fonctionneront en même temps.
- Appuyez sur **2**, puis appuyez sur d'autres boutons pour régler la luminosité, l'heure, le pouls, toutes les lumières du groupe 2 suivront les paramètres et fonctionneront en même temps.
- Appuyez sur **3**, puis appuyez sur d'autres boutons pour régler la luminosité, l'heure, le pouls, toutes les lumières du groupe 3 suivront les paramètres et fonctionneront en même temps.

Remarque : Veuillez d'abord régler la lumière dans le groupe 1, 2 ou 3.

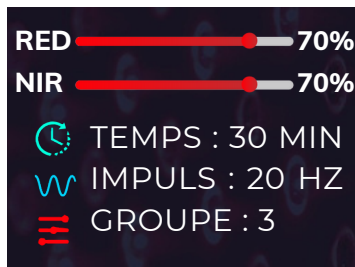


Lumière rouge (0-100 %) : Le panneau de thérapie par la lumière rouge stimule l'activité cellulaire, favorisant la production de collagène et améliorant la santé de la peau. Réglé à une intensité de 100 %, il traite efficacement les affections cutanées telles que les rides, l'acné et l'inflammation. Avant de dormir, réduisez l'intensité à 50-70 % pour vous détendre et améliorer la qualité du sommeil. Cette douce exposition à la lumière régule les rythmes circadiens, favorise la production de mélatonine et favorise un sommeil réparateur.

Lumière NIR (0-100 %) : La lumière proche infrarouge du panneau pénètre plus profondément dans la peau, ciblant les muscles, les articulations et les tissus plus profonds. Il est souvent réglé à des intensités variables en fonction de l'effet thérapeutique souhaité. Des intensités plus faibles sont utilisées pour un réchauffement et une relaxation douce, tandis que des intensités plus élevées sont utilisées pour une pénétration plus profonde des tissus, une récupération de blessures et un soulagement de la douleur.


Durée (1-30 min) : 10-20 minutes recommandées. Le bip retentira à mi-parcours

Pouls (0-20 Hz) : pour une relaxation et une qualité de sommeil optimales avant le coucher, réglez le pouls du panneau de thérapie par la lumière rouge sur une fréquence basse, autour de 1 à 5 Hz. Ce doux effet pulsé calme l'esprit et apaise le système nerveux, favorisant ainsi un sommeil réparateur. Des fréquences plus élevées, autour de 10-20 Hz, procurent un effet plus stimulant et conviennent à une utilisation diurne pour augmenter la vigilance et les niveaux d'énergie, fournissant un coup de pouce doux mais efficace à votre routine matinale, aidant à éveiller le corps et l'esprit.

Groupes (1-3) : utilisés pour regrouper plusieurs panneaux Alpinglow ou pour connecter le(s) panneau(s) à l'application système RTL. L'application système RTL permet un réglage facile de tous les paramètres du panneau au lieu d'utiliser la télécommande.

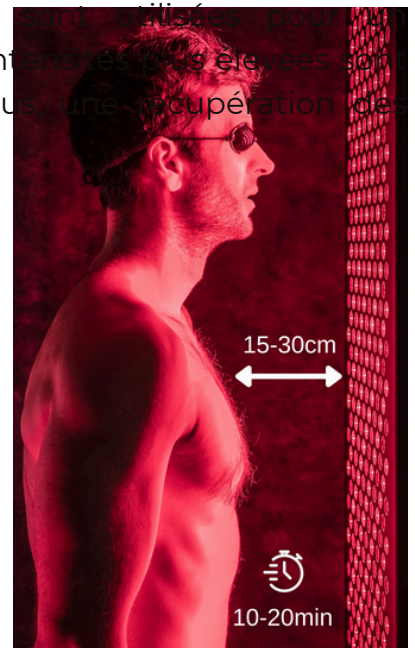

RTL SYSTEM
 Health & Fitness
 Designed for iPhone. Not verified for macOS.

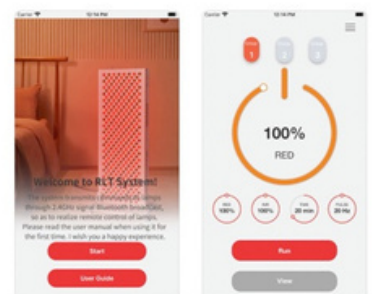




Expert1500 and Lite300 Accessoires

- 1. Lumière thérapeutique LED
- 3. Crochet de porte
- 5. Matériel de suspension
- 7. Câble de raccordement

- 2. Protection des yeux
- 4. Télécommande
- 6. Câble d'alimentation
- 8. Assemblage de câbles

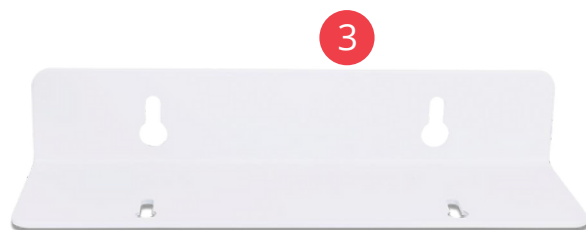

Master3000 & GrandMaster6000 Accessoires

1. Lumière de thérapie LED


3.Support mural

5. Protection des yeux

2. Télécommande


4. Câble d'alimentation

Installez votre Alpinglow Summit Expert1500

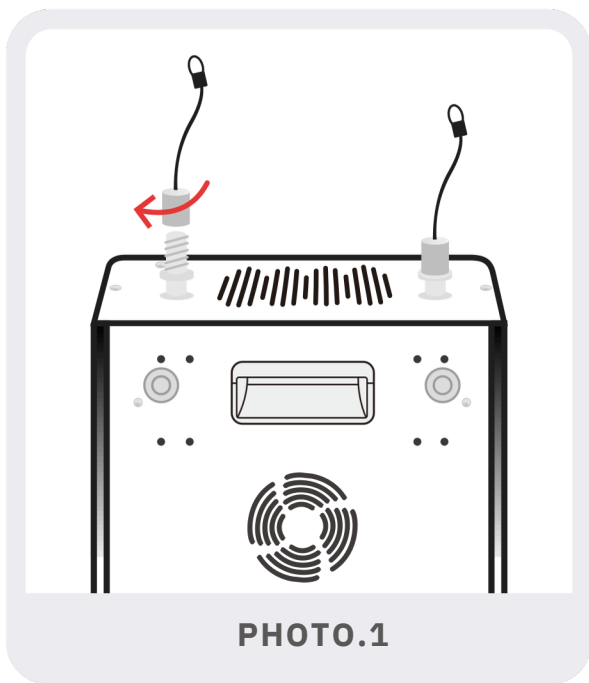

ÉTAPE 1 ▶

Posez tout le matériel inclus, y compris votre panneau, sur une surface rembourrée. Ensuite, vissez les tiges filetées en haut de l'appareil et serrez à la main avec la clé Allen incluse. Ensuite, vissez les supports de câbles aux poteaux filetés, comme indiqué sur la Photo.1.

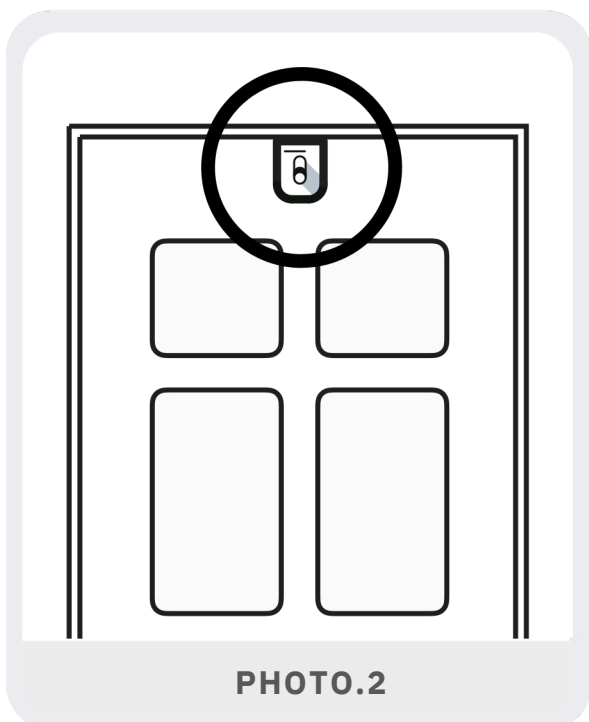

ÉTAPE 2 ▶

Accrochez le crochet personnalisé inclus sur n'importe quelle porte de taille standard, comme indiqué sur la Photo.2.

Installez votre Alpinglow Summit Expert1500

ÉTAPE 3 ▶

Connectez les supports de câbles au mousqueton fixé au système de réglage en hauteur. Ensuite, connectez le maillon à pression de l'extrémité opposée directement au crochet de la porte, comme indiqué sur la Photo.3.

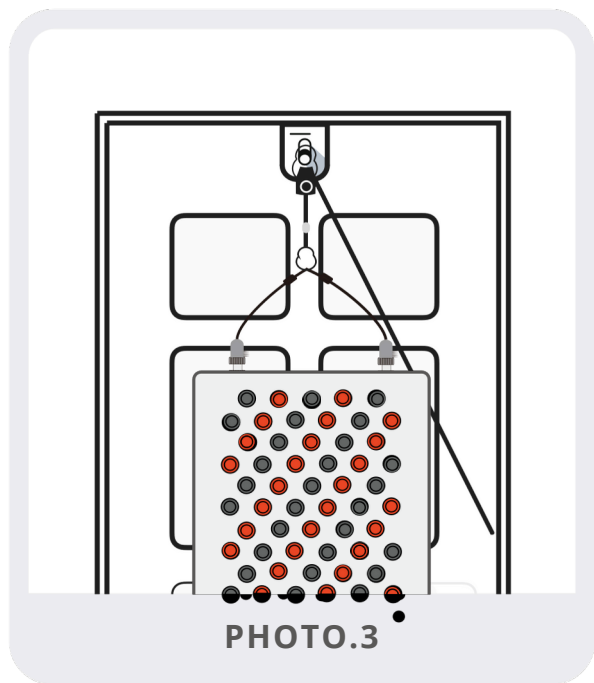


PHOTO.3

ÉTAPE 4 ▶

Pour élever votre panneau à la hauteur souhaitée, tirez sur le câble lâche tout en soutenant l'appareil avec votre main opposée, comme indiqué sur la Photo.4.


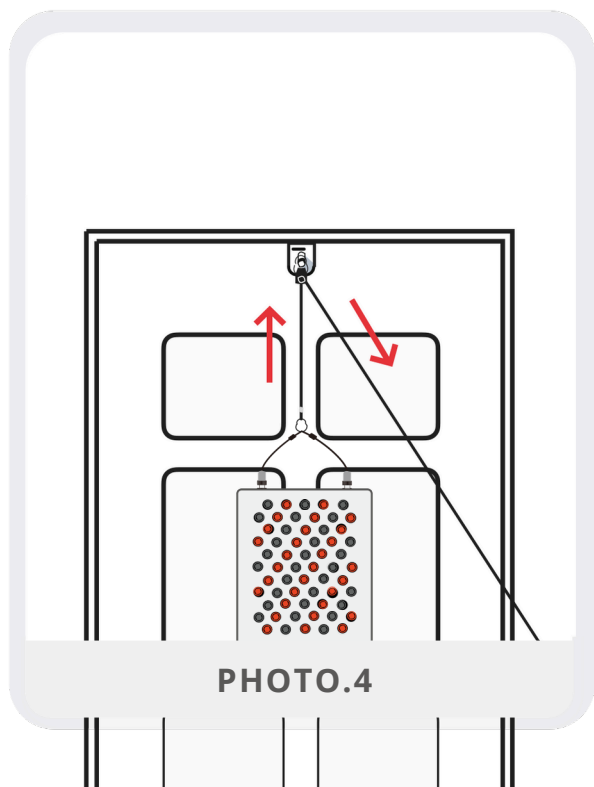


PHOTO.4



Assurez-vous de bien soutenir l'appareil lors de sa montée et de sa descente grâce au système de réglage en hauteur .

Connexion de plusieurs unités d'éclairage de la Alpinglow Summit Expert1500

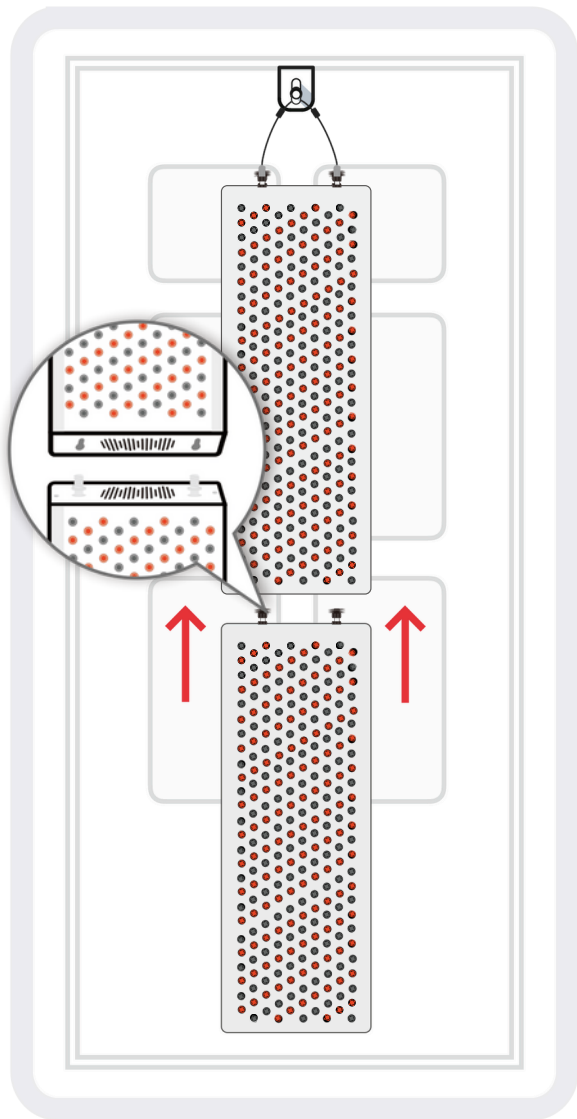

ÉTAPE 5 ▶

Pour connecter la LED Alpinglow inférieure, soulevez-la en position sous le dispositif principal déjà en place. Alignez les tiges filetées avec les trous des embouts de l'appareil supérieur. Ensuite, faites glisser les tiges filetées inférieures dans les trous et faites-les glisser vers l'avant pour les verrouiller en place.

Instructions

- Distance : Appliquer de 15 à 30 cm.
- Durée de la séance : Continuez pendant 2 à 15 minutes, selon la distance.
- Fréquence : Faites-le 2 à 4 fois par semaine jusqu'à ce que les résultats se fassent sentir.
- Entretien : Continuez à utiliser plusieurs fois par semaine.

Instruction de support de montage mural pour Master3000



AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement l'avertissement suivant avant de l'assembler.




Ne pas installer ou assembler si le produit ou le matériel est endommagé ou manquant. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.

Capacité de charge maximale : 32KG/70,5LBS

N'utilisez pas ce produit pour autre chose que la conception originale


Nous ne couvrons pas les dommages suivants : produit modifié, mauvaise installation ou utilisation dans la plage de poids spécifiée, dommages causés par la nature.

Liste des

Ax1	Bx2	Cx2	
			


Étape 1

Percez des trous dans le mur selon la taille

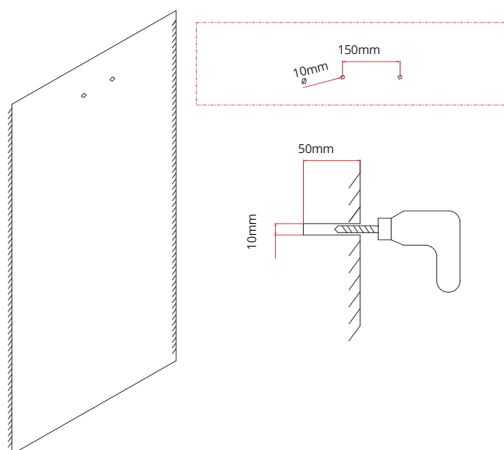


Étape 2

Enfoncez le boîtier en plastique gris dans le trou, dévissez la vis et laissez 4 mm du mur.

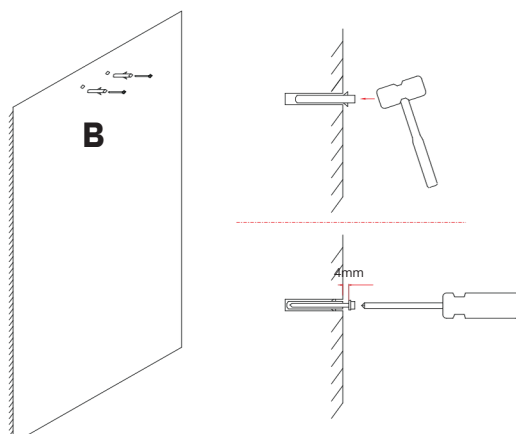

Étape 3


Raccrochez le support mural et serrez les vis.

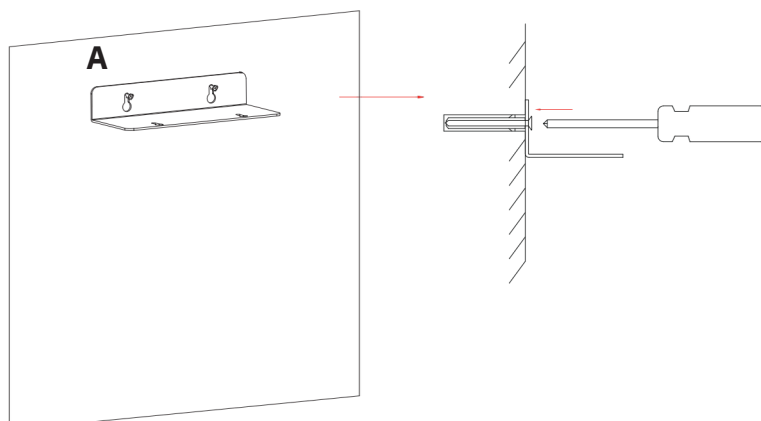


Étape 4 ALPINGLOW SUMMIT MASTER3000

Accrochez la lumière sur le support :

- ① **Alignez les connecteurs supérieurs de la lampe avec les trous du support.**
- ② **Faites glisser les connecteurs supérieurs de la lampe vers le haut dans les trous, puis repoussez pour les verrouiller en place.**
- ③ **Vissez les vis en plastique dans les trous.**

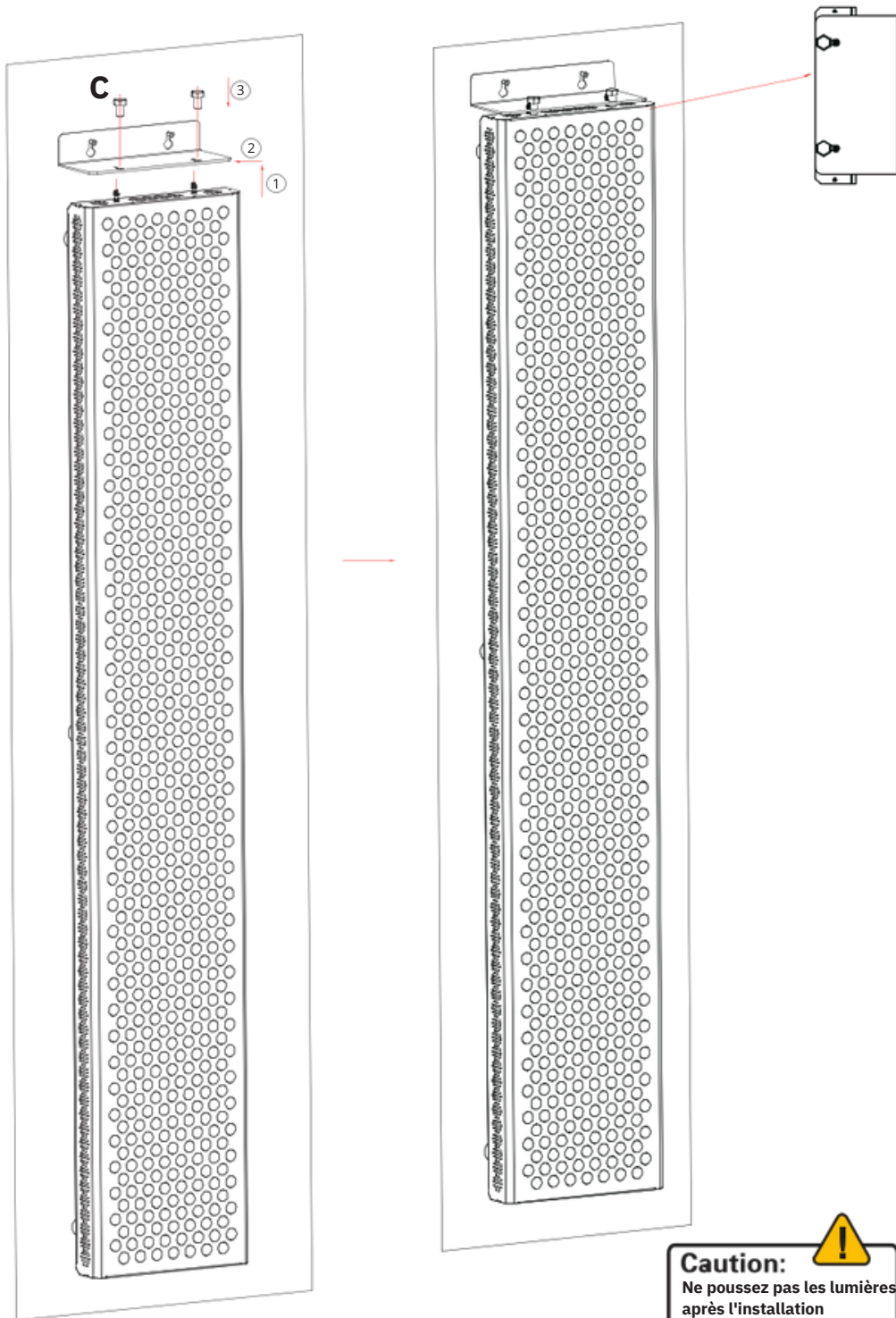

Caution: 
Ne poussez pas les lumières
après l'installation

Instruction de support de montage mural pour GrandMaster6000






AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement l'avertissement suivant avant de l'assembler.


- Ne pas installer ou assembler si le produit ou le matériel est endommagé ou manquant. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
- Capacité de charge maximale : 43KG/94,8LBS.
- N'utilisez pas ce produit pour autre chose que la conception originale
- Nous ne couvrons pas les dommages suivants : produit modifié, mauvaise installation ou utilisation dans la plage de poids spécifiée, dommages causés par la nature.

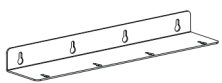Liste des pieces

Ax1 	Fx4 	Cx4 	
--	--	--	--


Étape 1

Percez des trous dans le mur selon la taille

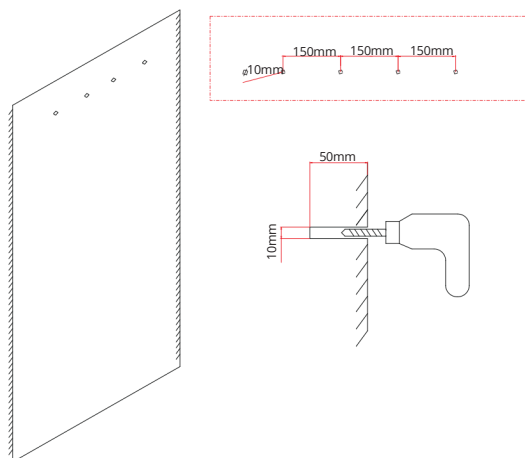


Étape 2

Enfoncez le boîtier en plastique gris dans le trou, dévissez la vis et laissez 4 mm du mur.

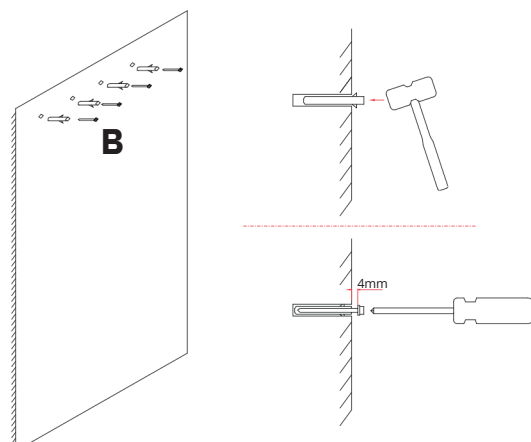

Step 3


Raccrochez le support mural et serrez les vis.

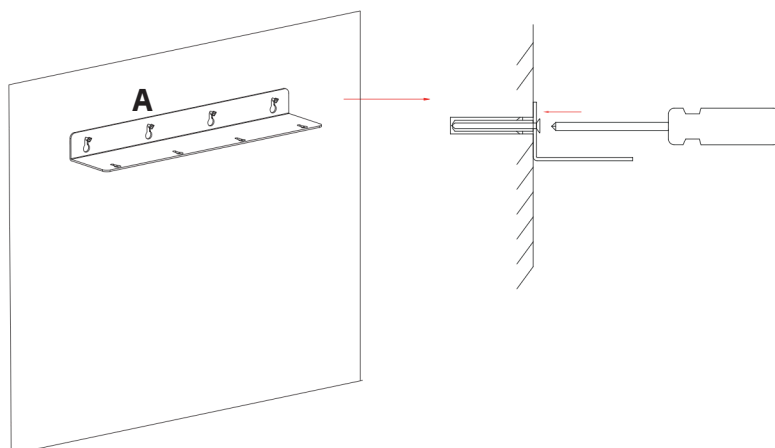

Étape 4 ALPINGLOW SUMMIT GRANDMASTER6000

Accrochez la lumière sur le support :

①Alignez les connecteurs supérieurs de la lampe avec les trous du support. ②Faites glisser les connecteurs supérieurs de la lampe vers le haut dans les trous, puis repoussez pour les verrouiller en place. ③Vissez les vis en plastique dans les trous.

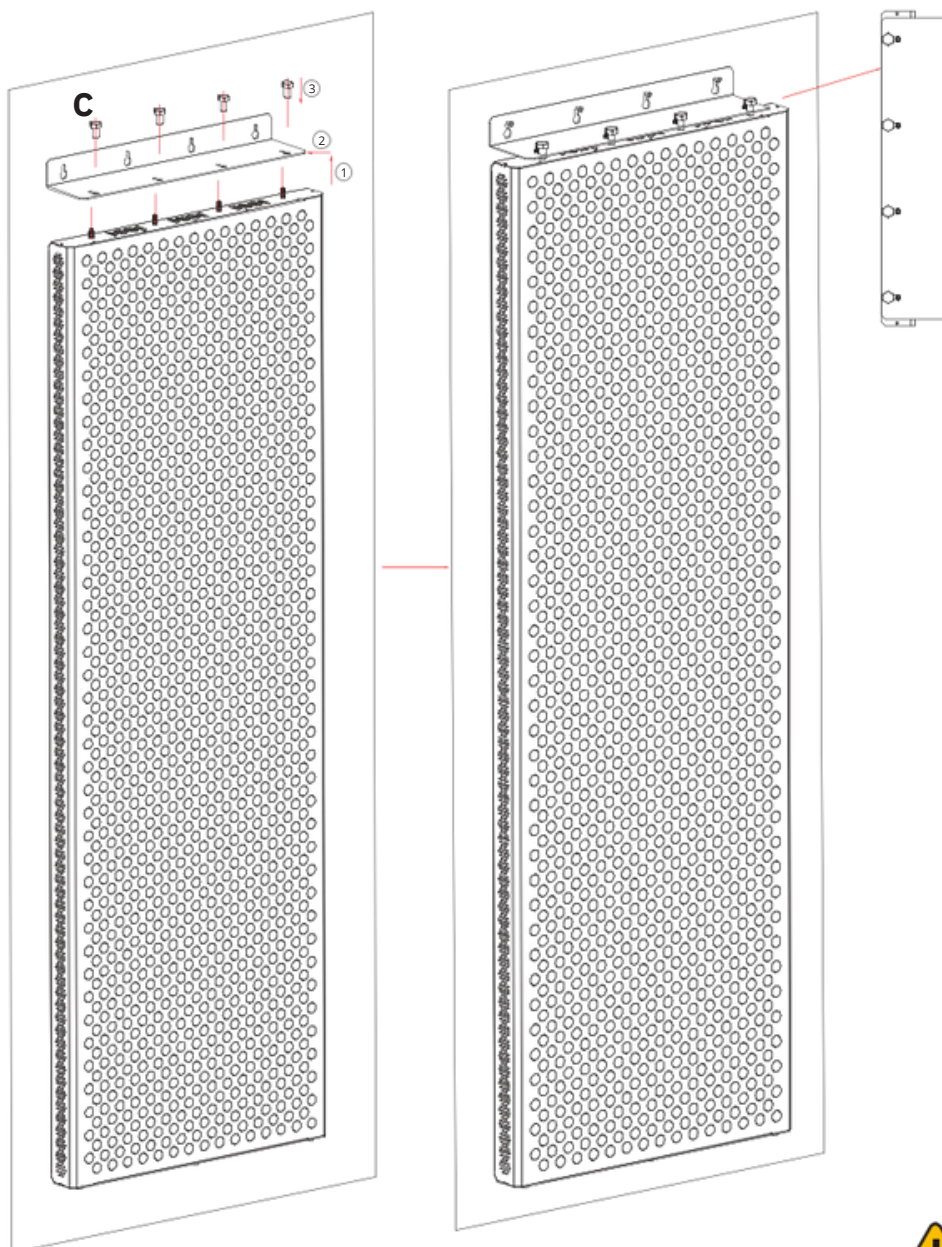





Caution: 
Ne poussez pas les lumières
après l'installation

Précautions

Veillez prêter attention aux REMARQUES suivantes lors de l'utilisation de l'appareil :

- Veuillez lire toutes les REMARQUES du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
- Utiliser avec prudence chez les patients souffrant de maladies allergiques de la peau
- Les enfants et les personnes handicapées doivent utiliser cet appareil sous la surveillance de tuteurs ou de personnel médical.
- Si le patient a tendance à saigner ou présente une inflammation aiguë, une forte fièvre, une tuberculose active, etc., l'éclairage thérapeutique à LED doit être interdit.
- Lors de l'utilisation de la lumière thérapeutique LED, il convient de prêter attention à la distance d'irradiation sûre et à la durée de traitement appropriée.
- Lors de l'irradiation de la tête, il faut veiller à protéger les yeux pour éviter les brûlures oculaires.
- L'appareil n'est pas étanche, ne le nettoyez pas avec une serviette humide non essorée et ne plongez pas l'appareil dans l'eau, ne lavez pas les composants électriques avec de l'eau ou du liquide.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil s'il entre en contact avec de l'eau ou du liquide.
- Ne tirez pas avec force sur le cordon d'alimentation pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil s'il entre en contact avec de l'eau ou du liquide.
- Ne pas utiliser avec d'autres équipements de chauffage en même temps. Ne modifiez pas ou ne réparez pas cet appareil par vous-même.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements où la température dépasse 45°C.
- Évitez la lumière directe du soleil lors du stockage des lampes et stockez-les dans un endroit frais et sec.
- Veuillez garder une distance d'au moins 11 cm entre la peau et la surface émettrice de lumière de la lampe pour éviter les brûlures à haute température.
- En cas d'anomalie ou d'inconfort lors de l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et contactez-nous.

Galerie de photos

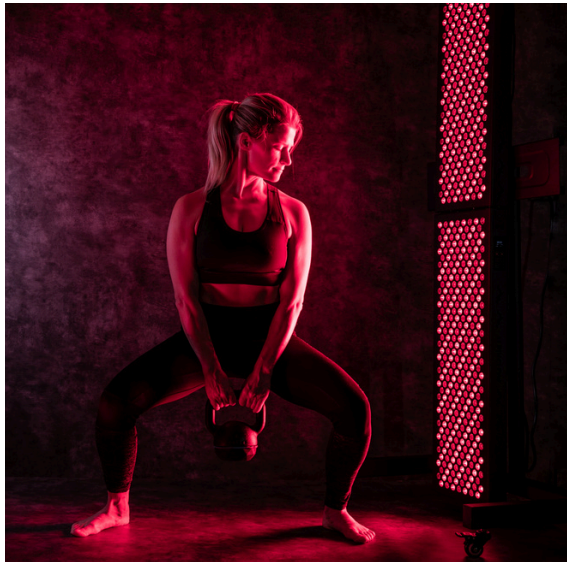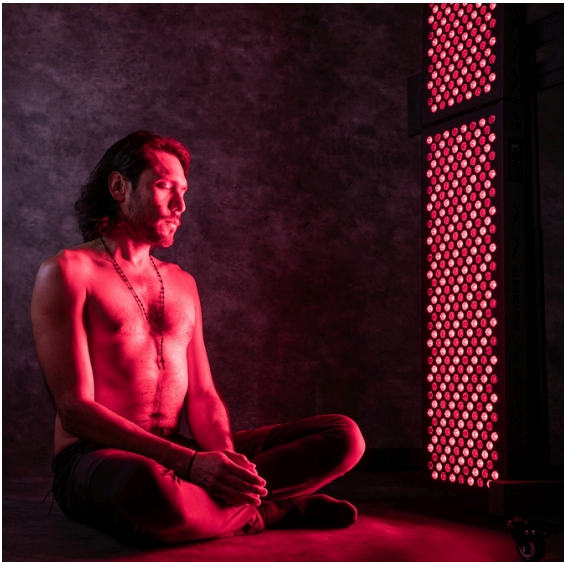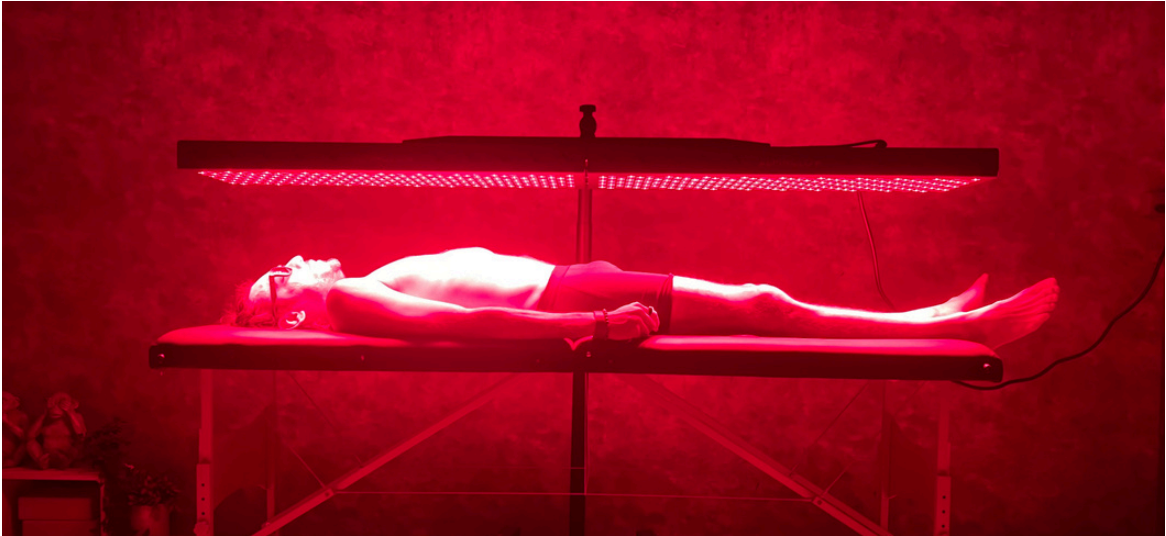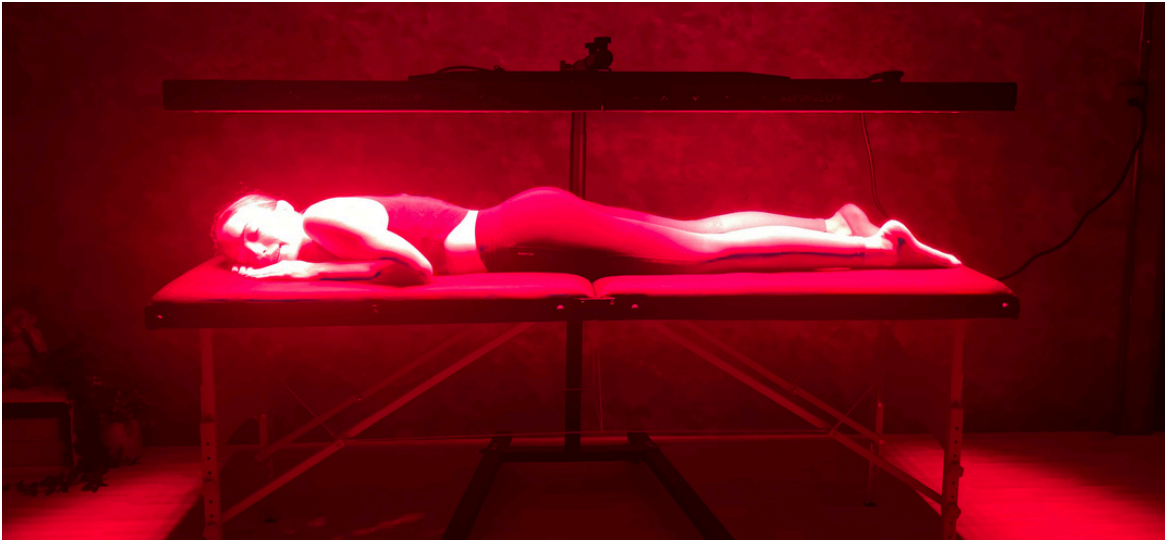

Warranty Card

Coordonnées

Produit

Commentaires

Clauses de garantie

1. Nos produits sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de TROIS (3) ANS à compter de la date d'achat.
2. Le retour gratuit est garanti pendant une période d'un MOIS.
3. La garantie ne couvre pas les dommages suivants : produit modifié, installation ou utilisation inappropriée, nettoyage inapproprié, surtensions électriques ou dommages causés par la nature.
4. La garantie ne couvre pas la perte d'un tiers avec des dommages directs ou indirects.

Avertissement et nettoyage

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. N'utilisez pas de sprays nettoyants. Essayez avec un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer.



www.alpinglow.ch




[alpinglow_switzerland](https://www.instagram.com/alpinglow_switzerland)



[Alpinglow](https://www.facebook.com/Alpinglow)

 info@alpinglow.ch

 +41 79 674 71 07

 Crans Montana, Switzerland



www.alpinglow.ch

Avertissement : Les panneaux de thérapie par lumière rouge sont destinés uniquement à des fins de bien-être général et ne doivent pas être utilisés comme substitut à un avis médical professionnel ou à un traitement. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Consultez un professionnel de la santé avant utilisation.